

Manufacturer

Enztec Limited

Distributed by

MATHYS 
European Orthopaedics



Réservé uniquement aux professionnels de santé. L'image illustrée ne représente pas de lien ni avec l'usage du dispositif médical décrit ni avec sa performance.

Preservation in motion



Porte-fraise pour offset

Se fonder sur notre héritage

Faire progresser la technologie

Un pas après l'autre avec nos partenaires cliniques

Poursuivre l'objectif de préserver la mobilité



Preservation in motion

En tant qu'entreprise suisse, Mathys s'engage à suivre cette ligne directrice et gère une gamme de produits avec pour objectif le développement des philosophies traditionnelles concernant les matériaux ou le design afin de répondre aux défis cliniques existants. Ceci se reflète dans notre image: des activités suisses traditionnelles associées à un équipement sportif en constante évolution.

Porte-fraise pour offset

Porte-fraise pour offset est associé à une fraise acétabulaire afin de préparer la mise en place du cotyle. **Pour la fraise**, le chirurgien peut **choisir entre deux types de connexion** : verrouillable ou ouvert. L'option verrouillable est la variante standard. Il permet également de faire fonctionner la fraise à l'envers si des copeaux d'os doivent être comprimés pour combler le défaut de l'acétabulum lors d'une greffe osseuse. L'option ouverte offre à l'utilisateur la possibilité de connecter l'arbre sur la fraise acétabulaire in situ et aussi de la déconnecter au même endroit.


En outre, la **structure minimaliste de la porte-fraise pour offset** au niveau de la connexion à la fraise facilite le maniement avec divers accès. La **position de la poignée** peut être réglée en cours d'opération afin d'assurer le meilleur fraisage possible en fonction de la position de l'opérateur et du patient et de permettre une bonne transmission des forces.



Avantages




verrouillable

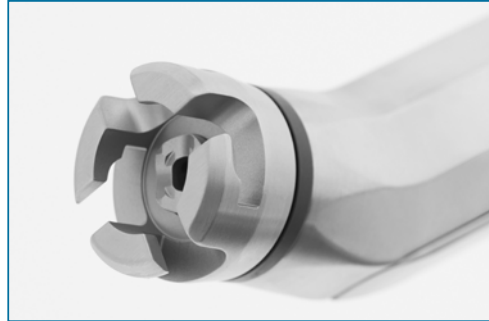

ouvert

Deux connexions

- Deux types de connexion pour la fraise : verrouillable ou ouvert
- Greffe d'os possible grâce à la connexion verrouillable de la fraise en raison de la rotation arrière de la fraise.
- Possibilité de montage de la fraise in situ en utilisant la connexion ouverte
- Bon maniement sur tous les accès usuels grâce à un volume et un dimensionnement distal minimal

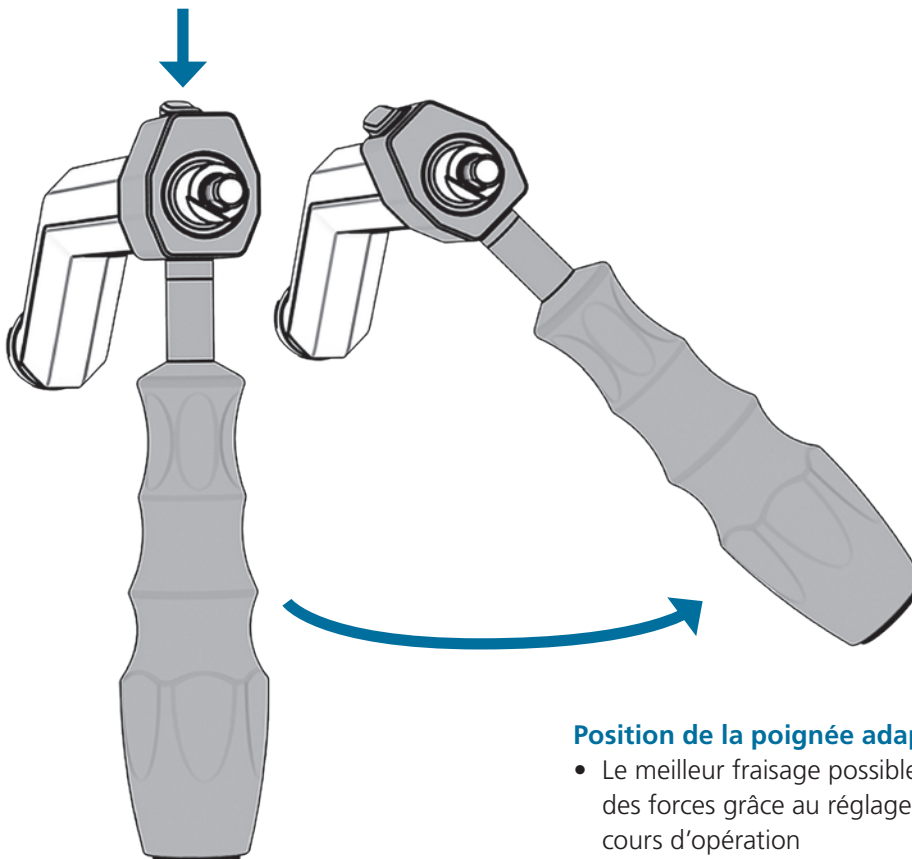

Position de la poignée adaptable

- Le meilleur fraisage possible et une bonne transmission des forces grâce au réglage de la position de la poignée en cours d'opération

Design modulaire

- Montage intuitif et démontage simple pour le nettoyage de l'instrument
- Pièces de rechange disponibles pour les réparations
- Options présentes pour les raccords Powertool usuels



Boîtier



Entraînement



Raccordement



Capot



Poignée

Instruments



N° de réf.	Description
51.34.1150A	Porte-fraise pour offset verrouillé AO
51.34.1151A	Porte-fraise pour offset ouvert AO
51.34.1169A	Porte-fraise p/ offset verrouillé Zimmer
51.34.1170A	Porte-fraise p/ offset ouvert Zimmer
51.34.1171A	Porte-fraise p/ offset verrouillé Hudson
51.34.1172A	Porte-fraise p/ offset ouvert Hudson

Pièces de rechange:

N° de réf.	Description
4250-7048	Logement de porte-fraise pour offset
4250-7031	Couvercle de porte-fraise pour offset
4250-7012	Poignée de porte-fraise pour offset

N° de réf.	Description
4250-7032	Accoupl. Zimmer/porte-fraise pr offset
4250-7033	Accoupl. Hudson/porte-fraise pr offset
4250-7034	Accoupl. AO large/porte-fraise pr offset

N° de réf.	Description
4250-7035	Transmission ouv./porte-fraise pr offset
4250-7036	Transmiss. fermée/porte-fraise pr offset

Manufacturer

Enztec Limited

Distributed by

MATHYS 
European Orthopaedics

Australia	Mathys Orthopaedics Pty Ltd Artarmon, NSW 2064 Tel: +61 2 9417 9200 info.au@mathysmedical.com	Italy	Mathys Ortopedia S.r.l. 20141 Milan Tel: +39 02 4959 8085 info.it@mathysmedical.com
Austria	Mathys Orthopädie GmbH 2351 Wiener Neudorf Tel: +43 2236 860 999 info.at@mathysmedical.com	Japan	Mathys KK Tokyo 108-0075 Tel: +81 3 3474 6900 info.jp@mathysmedical.com
Belgium	Mathys Orthopaedics Belux N.V.-S.A. 3001 Leuven Tel: +32 16 38 81 20 info.be@mathysmedical.com	New Zealand	Mathys Ltd. Auckland Tel: +64 9 478 39 00 info.nz@mathysmedical.com
France	Mathys Orthopédie S.A.S 63360 Gerzat Tel: +33 4 73 23 95 95 info.fr@mathysmedical.com	Netherlands	Mathys Orthopaedics B.V. 3001 Leuven Tel: +31 88 1300 500 info.nl@mathysmedical.com
Germany	Mathys Orthopädie GmbH «Centre of Excellence Sales» Bochum 44809 Bochum Tel: +49 234 588 59 0 sales.de@mathysmedical.com «Centre of Excellence Ceramics» Mörsdorf 07646 Mörsdorf/Thür. Tel: +49 364 284 94 0 info.de@mathysmedical.com «Centre of Excellence Production» Hermsdorf 07629 Hermsdorf Tel: +49 364 284 94 110 info.de@mathysmedical.com	P. R. China	Mathys (Shanghai) Medical Device Trading Co., Ltd Shanghai, 200041 Tel: +86 21 6170 2655 info.cn@mathysmedical.com
		Switzerland	Mathys (Schweiz) GmbH 2544 Bettlach Tel: +41 32 644 1 458 info@mathysmedical.com
		United Kingdom	Mathys Orthopaedics Ltd Alton, Hampshire GU34 2QL Tel: +44 8450 580 938 info.uk@mathysmedical.com

Local Marketing Partners in over 30 countries worldwide ...